



低中频治疗仪

SY-BS24P/SY-BS24M/SY-BS24S/SY-BS24使用说明书

司羿(长沙)智能科技有限公司

医疗器械生产许可证:湘药监械生产许20210089号

医疗器械注册证/技术要求编号:湘械注准20232090291

说明书版本:V1.1



重要说明

使用环境说明

本产品属于可连续运行的普通设备(不防进液的封闭设备),不能在有易燃麻醉气和空气的混合气或和氧或氧化亚氮的混合气情况下使用。

本产品可能会由于便携式电视、无线电收发机、电动玩具等发出的电磁波的干扰而导致故障,请确保远离这些产品。

电磁兼容性:本产品需远离能产生强电磁波或噪音的物体。如:核磁共振设备、微波发生装置、辐射设备(X光机、CT机等);

避免本产品接近高频手术器械。如:高频电刀、手机等。

知识产权

本说明书及其对应的产品的知识产权属于上海司羿智能科技有限公司所有,以下简称“司羿智能”。



以及 羿生 是司羿智能的注册商标,所有权属于司羿智能。

未经司羿智能书面同意,任何人或组织不得以任何形式复制、修改、翻译或发行本使用说明书。

免责声明

本手册上的所有内容严格按照国家相关法律法规及司羿(长沙)智能科技有限公司的技术规范编写,并且已经过严格核对并确保无误。由于使用不当而导致的后果,司羿(长沙)智能科技有限公司一概不负责。

司羿(长沙)智能科技有限公司有权根据产品规格更改和软件升级,变更本使用说明书的内容及版本号,恕不另行通知。

本使用说明书发行日期:2023-10-15

本使用说明书版本:V1.1

售后服务

如果需要产品备用说明书或者其他资料,请联系司羿(长沙)智能科技有限公司或者授权经销商。使用过程遇到任何问题和故障,请第一时间联系司羿(长沙)智能科技有限公司或者授权经销商。在保修范围内出现故障,由司羿(长沙)智能科技有限公司直接负责维修;特殊情况下由司羿(长沙)智能科技有限公司授权经过专业培训的公司或人员进行维修。

保修说明

司羿(长沙)智能科技有限公司是可判断并认定是否在保修范围内的唯一机构。保修期限详见随附保修卡。

在满足以下全部要求的情况下,司羿(长沙)智能科技有限公司才认为应对产品的安全性、可靠性和性能负责,即组装、调校、维修、升级等均由司羿(长沙)智能科技有限公司进行或者授权进行;有关的电气设备符合国家标准和本说明书的要求;产品操作请按照本说明书中描述的方法和步骤进行。

非正常使用设备或设备使用条件不在说明书指示范围内所造成的故障,均不在保修范围内。发生磨损或者过失责任事故,如不恰当的使用或者擅自拆卸、更改设备用途等造成的故障,均不在保修范围内。

注册人/生产企业:司羿(长沙)智能科技有限公司

住所/生产地址:长沙高新开发区谷苑路229号海凭园生产厂房六幢9层912房

售后服务单位:司羿(长沙)智能科技有限公司

售后服务地址:长沙高新开发区谷苑路229号海凭园生产厂房六幢9层912房

售后服务电话:400-6886-275

生产日期:详见产品合格证

使用期限:5年

符号说明

符号	说明	符号	说明
	警告!请查阅随机文件!		注意!请勿丢弃!
	遵循操作说明书		开/关
	危险警告		易碎物品
	向上		怕雨
	怕晒		怕辐射
	BF型应用部分		

警告及注意事项

标志	描述
 危险	请按照正常步骤插拔电源!否则会导致重伤或者死亡!
 危险	请不要用湿手插拔电源!否则会导致重伤或者死亡!
 危险	用规定的电源,否则会导致火灾或触电!
 危险	未经许可,非专业人员请勿拆卸或修理机器,否则会导致火灾或触电!
 危险	打开主机外壳前,必须移除电源,外壳打开时,设备不能使用!
 危险	设备电源为220V 50Hz,插座必须有接地功能,,使用设备前需要验证电源电压和适配器的电压值匹配,且电源需要接地!
 危险	体内植入型医用电子器械,例如:心脏起搏器等!
 危险	维持生命所用的医用电子器械,例如:人工心脏等!
 危险	医用电子器械,例如:心电图仪等!
 危险	如果使用者在身上同时使用高频手术设备 and 治疗仪时,在本仪器电极贴片位置,可能引起烧伤,也可能损坏仪器。如果在短波或微波治疗设备附近使用本仪器时,可能会导致仪器输出不稳定!
 危险	靠近胸部使用电极会增加心脏纤颤的危险
 危险	以免导致这些医用电子器械误动作或其他危险: ·请勿在心脏前后、头部、口腔、颈部上方或阴部皮肤疾患等部位使用; ·请勿与其它医疗器械一起使用,包括外涂剂与喷雾式外涂剂等使用; ·请不要用于治疗以外的目的; ·请勿把贴片导线的插头插入本仪器导线插孔以外的地方(如:电源插座插孔); ·请勿擅自修理、拆卸和改造本仪器。

 危险	以免发生事故,引起身体不适,导致触电危险,引起仪器故障。
 警告	身体或皮肤若有异常感觉,请咨询医生咨询,并遵医嘱行事。
 警告	在使用过程中,想将贴片移到别的部位或给他人使用时,请务必将电源切断之后,接收器强度调为0再移动。否则有可能遭受强烈冲击。
 警告	切勿带着电子器械进行治疗,有可能影响电子器械有错误动作(如:电子手表紊乱等)。
 警告	切勿给儿童或有意识表达障碍的人使用。会发生事故或引起身体不适。
 警告	就寝时,切勿使用。 1) 可能使本仪器产生故障。另外贴片有可能被移位而产生身体不适。
 警告	切勿在驾驶车辆时使用。 以免受到强烈的刺激而引起事故或麻烦。
 警告	切勿过长时间把贴片贴在身体上。 以免引起皮肤炎症。
 警告	在使用中,切勿用身上物品的金属件接触到电极片。 以免受到强烈的刺激。
 警告	切勿在本仪器附件使用移动电话。 以免引起本仪器误动作。
 警告	切勿在同一部位长时间(30分钟以上)使用。 以免使按摩部位肌肉疲劳而引起身体不适。
 警告	切勿在伤口和瘢痕处粘贴电极片。 以免再次损伤,并且不宜伤口愈合。
 警告	切勿使用刚刚洗涤后的电极片或沾水的电极片。 以免受到强烈刺激。
 注意	电极片必须与皮肤充分接触,否则有灼伤危险。
 注意	两电极不可同时置于心脏投影区前后左右。任何电极片放置方法都不可流过心脏。
 注意	使用中如有任何不适,应立即停止治疗。
 注意	每次使用完毕的电极片作废处理,不可二次使用。
 注意	建议在医生指导下使用本仪器。
 注意	请将仪器放置在水平的桌面,切勿随意移动。

目录

重要说明	1
符号说明	2
警告及注意事项	3
1 低中频治疗仪简介	6
2 产品型号及型号差异说明	6
2.1 产品型号命名规则	6
2.2 产品型号	6
2.3 软件版本	7
3 产品结构组成	7
3.1 主机	7
3.2 无线接收器	7
3.3 充电座	8
3.4 电极贴片	8
3.5 电极线	9
3.6 电源通讯线	9
3.7 适配器(含电源线)	10
4 产品适用范围、禁忌症和使用安装说明	10
4.1 适用范围	10
4.2 禁忌症	10
4.3 使用安装说明	11
4.3.1 环境建议	11
4.3.2 使用前准备	11
5 产品功能	12
5.1 中频治疗功能	12
5.2 低频治疗功能	15
5.2.1 配置常用低频处方	15
5.2.2 执行低频处方	17
5.2.3 新增和删除低频处方	17
5.3 系统设置	18
6 简易故障排查与维护	19
6.1 简易故障排查	19
6.2 环境保护	20
6.3 清洁、保养及维护	20
6.3.1 清洁、保养	20
6.3.2 训练设备维护	20
7 产品参数表	21
8 装箱清单	22
附录A	23
附录B	24
附录C	25

1. 低中频治疗仪简介

电疗是利用不同类型电流和电磁场治疗疾病的方法,是最常用的物理治疗方法之一,主要包含直流电疗法、低频脉冲电疗法、中频脉冲电疗法、高频电疗法和静电疗法。

低中频治疗仪,创新性的将低频脉冲电疗法和中频脉冲电疗法有机结合,可用于兴奋神经肌肉组织、镇痛、消炎、促进局部血液循环,软化瘢痕、松解粘连等,为临床提供一种适用范围广、简单易用、效率高的电疗设备。

低中频治疗仪主要由主机、充电座和无线接收器组成,其中主机部分标配4个独立的中频治疗通道,内置有10个专业中频治疗处方,同时充电座和多个无线接收器组成高效的低频治疗矩阵,内置20多个专业低频治疗处方,最多可支持40个人或者40个部位同时治疗。


低中频治疗仪的主机部分采用便携式设计,总重不超过4.5kg,可以轻松应用于治疗大厅、床旁、理疗室等不同场景。主机正面设置有一块10寸高清触摸大屏用于人机交互。

低中频治疗仪的低频治疗矩阵,包含充电座和多个无线接收器,每个无线接收器都是独立的低频治疗单元。无线接收器部分采用可穿戴式设计,外形尺寸 $\leq 55\text{mm} \times 50\text{mm} \times 15\text{mm}$,单体重量 $\leq 30\text{g}$,无线接收器内置锂电池,续航时间 ≥ 4 小时,满足患者在不同场景进行低频脉冲电疗,且完全不限制患者的自主行动和姿态。

低中频治疗仪同样支持临床治疗时添加和执行自定义处方,中频可调范围:3.5kHz~10.0kHz,低频可调范围:35Hz~150Hz,治疗时间的可调范围为1-180分钟。

2. 产品命名规则及产品型号差异

2.1 产品型号命名规则

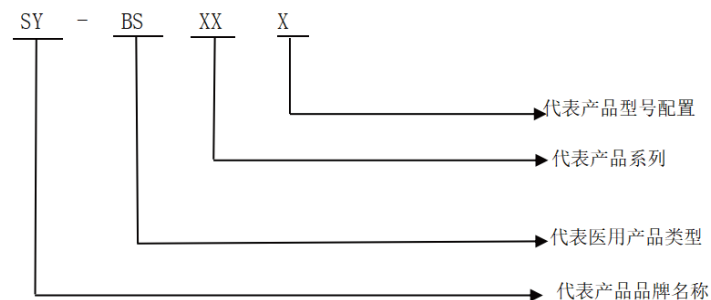

2.2 产品型号: SY-BS24P、SY-BS24M、SY-BS24S、SY-BS24


2.3 软件版本

本产品使用软件型号:SY-BS24S
本产品使用软件发布版本:V1

3. 产品结构组成


产品由主机、充电座、无线接收器、电极线、电极片 (外购有证) 和电源适配器等主要部件组成。

3.1 主机

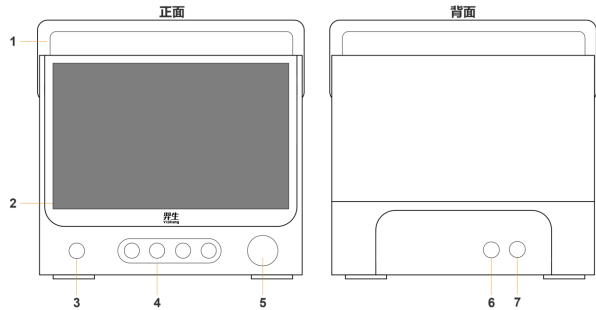


1.提手;2触控屏;3.开关键;4.中频输出口;5.旋钮按键;6.充电座接口;7.电源输入口

3.2 无线接收器

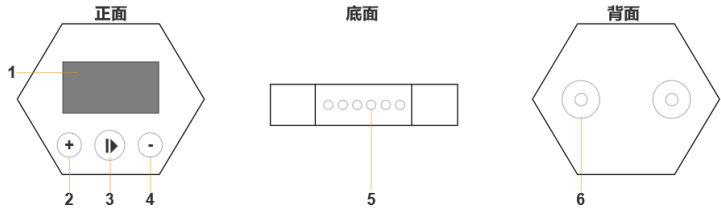


1.显示屏;2.强度增加键;3.启停键;4.强度降低键;5.金属触点;5.输出磁扣

3.3 充电座

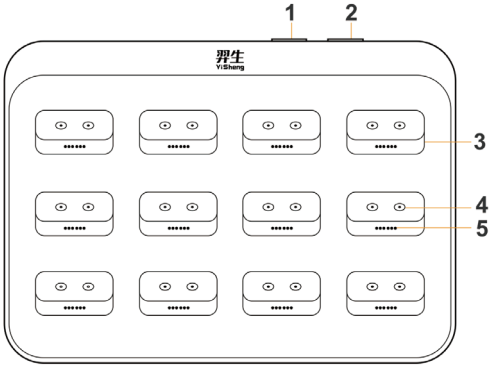


1.连接输入口;2.连接输出口;3.容纳仓;4.磁扣;5.金属触点

3.4 电极贴片

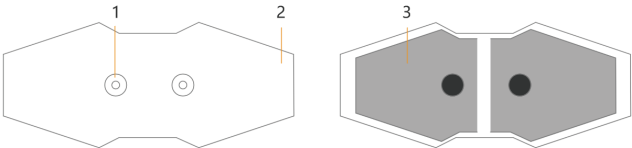


磁吸款:1.磁扣;2.无纺布;3.水凝胶

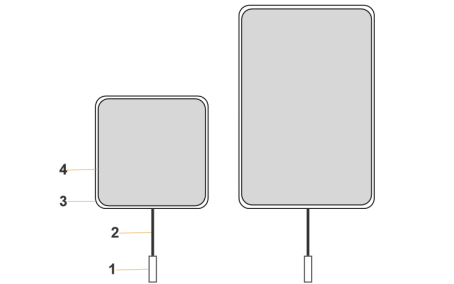

插针款:1.针式连接头;2.线体;3.无纺布;4.水凝胶

3.5 电极线

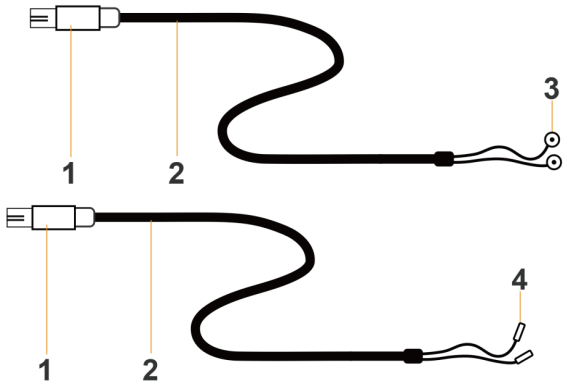


1.雷莫接头(2芯);2.线体;3.磁吸连接头;4.针式连接头

3.6 电源通讯线



1.雷莫接头(8芯);2.线体;3.雷莫接头 (7芯)

3.7 适配器(含电源线)

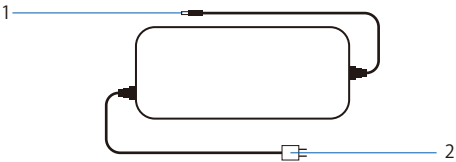

电源适配器组成:1.DC插头;2.电源插头

4. 适用范围和禁忌症

4.1 适用范围

用于兴奋神经肌肉组织、镇痛、消炎、促进局部血液循环，软化瘢痕、松解粘连等。

4.2 禁忌症

- (1)有出血倾向及凝血功能障碍患者的患者；
- (2)急性症及急性化脓性炎症患者；
- (3)恶性肿瘤局部；
- (4)孕妇；
- (5)体内埋入心律起搏器的患者；
- (6)体内有心电扫描器的患者；
- (7)癫痫病患者；
- (8)恶心治疗患者；
- (9)局部有金属异物的患者；
- (10)心脏部位不得使用；
- (11)痉挛性麻痹，脑血管意外后的痉挛期；
- (12)皮肤破损部位，颈动脉窦部位；
- (13)有严重认知障碍的患者；
- (14)眼部；
- (15)意识不清，肢体骨关节挛缩畸形；
- (16)神经应激性的不正常者；
- (17)严重心肝肾功能衰竭的患者。

4.3 使用安装说明

4.3.1 环境建议

(1)正常工作条件/环境:温度范围:0—40℃,相对湿度范围:59%-80%,大气压力范围:860hPa~1060hPa,无腐蚀性气体和通风良好的室内工作;

(2)尽量远离能产生强电磁波或噪音的物体。如:核磁共振设备、微波发生装置、辐射设备(X光机、CT机等),避免本产品接近高频手术器械;

(3)设备电源为220V 50Hz,插座必须有接地功能,,使用设备前需要验证电源电压和适配器的电压值匹配,且电源需要接地;

(4)储运条件/方法:温度范围:-20~40℃,相对湿度范围:5%-80%,大气压力范围:860hPa~1060hPa,产品装运应轻装轻卸,避免阳光直射,储存在无腐蚀性气体和通风良好的室内。

4.3.2 使用前准备

(1)从箱子中取出所有部件,确认无破损或者缺失等异常情况,并且放置在水平且无振动的桌面或者移动台车上;

(2)连接主机和充电座,如图4.3.1所示;

(3)并将无线接收器依次置入充电座中;

(4)取电极线依次插入主机正面的中频输出口,如图4.3.2所示;



图4.3.1



图4.3.2

(5)将适配器的DC接头插入主机后面板的DC插口,并将适配器通过电源线接入220V 50Hz的交流电源,主机上电源指示灯亮起;

(6)按下主机前面板左下角的开关按键,主机开机;

(7)根据需要连接电极线和电极片;

(8)治疗前,先清洁患部皮肤并擦干,再将电极片贴附在患部。

5. 产品功能

产品功能由2大治疗功能模块和系统设置模块,其中功能模块包括中频治疗功能模块和低频治疗功能模块。

5.1中频治疗功能

按照4.3中指示做好准备工作后,主机显示中频治疗功能界面。

如图5.1.1,界面上半部分为通道区,A、B、C、D四个中频输出通道独立显示,其中正在执行的处方、治疗时间和治疗强度的实时展示,并且控制各个中频输出通道的工作状态。

界面左下方为处方区,展示所有内置和自定义添加的处方名称。

界面右下方为参数区,展示被选中处方的波形、频率、脉宽、治疗时间和处方名称,也可以自由调节参数并形成自定义处方。

界面右侧为功能切换条,点击切换至低频治疗功能界面,如图5.2.1。



图5.1.1

5.1.1 执行中频处方

(1)在通道区,点击选择需要的通道,被选中的通道亮起,表示该通道进入选中状态,再次点击可以取消选中,也可同时选中多个通道;



图5.1.2



图5.1.3

(2)点击处方区,选择需要的处方,被选中的处方亮起,并在参数区显示该处方的细节参数,包括波形、频率、脉宽、治疗时间和处方名称,点击右上角“使用”按钮,将选中处方配置入该通道;



图5.1.4

(3)点击“时间栏”弹出时间调节窗口,点击“加”或“减”按钮调节,或者直接拖动调节治疗时间,确认无误后,点击“确认”按钮;

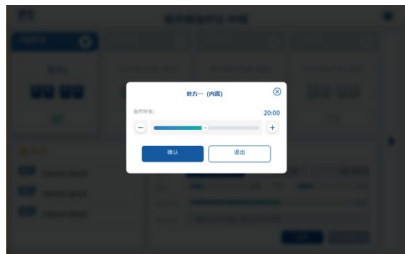


图5.1.6

(4)点击强度栏的“加”或“减”按钮,或者旋转主机右下角旋钮调节强度,顺时针为增加,逆时针为降低;

(5)点击通道右上角的开始键,如图5.1.7,该通道治疗开始,并开始倒计时,如图5.1.8;



图5.1.5



图5.1.7



图5.1.8



图5.1.9

(6)治疗开始后,也可以点击强度栏的“加”或“减”按钮,通过旋转主机右下角旋钮的方式,进行强度调节,如图5.1.8;

(7)治疗开始且无有效调节动作的一段时间后,该通道自动进入未选中状态,如图5.1.9,此时可以直接点击通道上方的“暂停”和“停止”按钮,但无法进行强度调节动作,重新点击选中该通道后可再进行强度调节动作;

(8)到达预设的治疗时间后,主机界面弹窗提醒,并自动停止治疗,如图5.1.10。

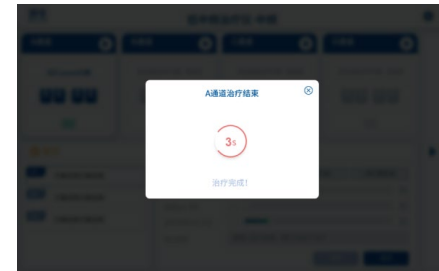


图5.1.10

5.1.2 新建和删除中频处方

(1)在参数区,通过点击“加”或“减”按钮,或者直接拖动参数条,将波形、频率、脉宽、治疗时间等调节到合适的参数,如图5.1.11;



图5.1.11



图5.1.12

- (2)输入或者修改参数区的处方名称, 并点击确认按钮, 如图5.1.12;
- (3)点击参数区右下角的“保存”按钮, 将自定义处方加入处方区, 如图5.1.13;



图5.1.13

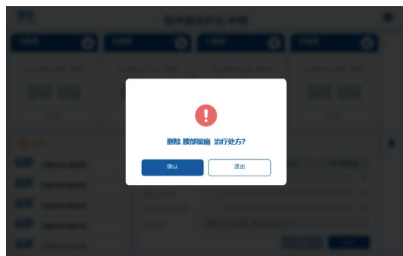


图5.1.14

- (4)上下滑动处方区, 可以找到新建的自定义中频处方, 再按照5.1.1中描述的步骤即可使用该自定义中频处方;
- (5)在处方区找到需要删除的中频处方, 点击并且长按2秒, 弹出删除确认窗口, 如图5.1.14, 点击“确认”将删除该中频处方。(请注意: 内置中频处方无法被删除。)

5.2低频治疗功能

如图5.2.1, 界面上半部分为的配置区, 展示充电座各个仓位的低频处方配置情况。

界面左下方为处方区, 展示所有内置和自定义添加的处方名称。

界面右下方为参数区, 展示被选中处方的波形、频率、脉宽、治疗时间、配置数量和处方名称, 也可以自由调节参数并形成自定义处方。

界面左侧为功能切换条, 点击切换至中频治疗功能界面, 如图5.1.1。



图5.2.1

5.2.1配置常用低频处方

- (1)如图5.2.2, 在处方区选择并点击需要配置的低频处方, 右侧参数区自动展示该处方的参数, 包括波形、频率、脉宽、治疗时间和配置数量;

- (2)可以点击“加”或“减”按钮或者直接拖动, 调整治疗时间和需要配置的数量, 点击右下角“使用”按钮, 即可将完成配置;



图5.2.2



图5.2.3

- (3)完成配置后, 在配置区展示已配置的处方名称和配置仓位, 如图5.2.3, 图中示例代表01号、02号、03号和04号4个无线接收器被配置为“镇痛-处方一”, 且治疗时间为20分钟;

- (4)配置仓位亮起, 代表对应仓位的无线接收器已完成低频处方配置, 主机界面如图5.2.4, 已完成配置的无线接收器, 显示如图5.2.5; 仓位置灰, 代表对应仓位的无线接收器离线;



图5.2.4



图5.2.5

- (5)在配置区点击处方对应的“锁定”按钮, 将该常用处方设置为锁定状态, 如图5.2.6, 关机重启后仍然保留该处方; 未锁定的低频处方, 在每次关机动作时即被移出配置区;

- (6)配置区未锁定的低频处方, 选中并长按2秒, 弹出取消使用的确认框, 如图5.2.7, 点击“确认”后可取消配置该处方, 并从配置区移除。



图5.2.6

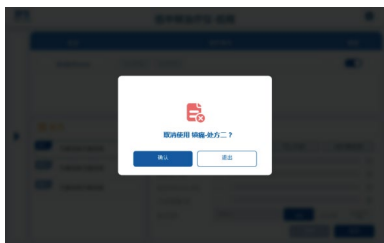


图5.2.7



图5.2.10



图5.2.11

5.2.2 执行低频处方

- (1) 在需要治疗时, 从充电座取出完成配置对应处方的无线接收器, 主机弹框提示无线接收器被拔出;
- (2) 连接理疗电极片并贴敷患侧后, 点击无线接收器上的开始键, 即可开始低频治疗;
- (3) 在低频治疗过程中, 可以根据患者实际情况, 点击无线接收器上的“加”或“减”按钮调节治疗强度;
- (4) 当达到预设的治疗时间后, 低频治疗自动结束, 该无线接收器中配置的处方自动删除, 需要放回充电座再次配置处方后, 可再次进行治疗。

5.2.3 新增和删除低频处方

- (1) 在参数区, 通过点击“加”或“减”或者直接拖动的方式, 调节至需要的低频参数, 包括波形、频率、脉宽、治疗时间和配置数量, 如图5.2.8;

- (4) 点击处方区右下角“使用”按钮, 完成常用低频处方配置, 如图5.2.11;
- (5) 在处方区选中处方并长按2秒, 弹出删除确认框, 如图5.2.12, 点击确认即删除该中频处方; (注意: 内置中频处方无法被删除)

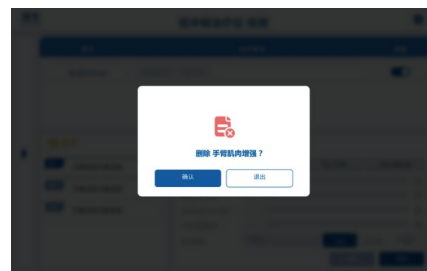


图5.2.12



图5.2.8



图5.2.9

- (2) 点击修改或输入该自定义低频处方名称, 如图5.2.9, 并点击确认;
- (3) 点击“保存”按钮, 将该自定义低频处方加入到处方区, 并就自动进入选中状态, 如图5.2.10, 也可以点击“保存并使用”按钮, 直接完成自定义处方的保存和配置动作;

5.3 系统设置

在中频治疗页和低频治疗页的右上角有“设置”按钮, 点击即可进入设置页。设置页中可设置系统亮度、默认主页、中频设置和低频设置等。系统设置页右上角为返回键, 点击后自动执行设置页中所有设置, 并返回中频治疗页或低频治疗页。



图5.3.1

系统亮度即中频治疗仪主机屏幕显示亮度,可通过点击“加”和“减”按钮或直接拖动调节,可调范围1-100,格值为1。

默认主页设置项,默认为中频,可选择中频治疗仪主机开机后默认进入中频治疗页或低频治疗页。

中频设置项包括默认治疗时间和处方保留选项,其中默认治疗时间的可调范围为1-180分钟,格值为1,可通过点击“加”和“减”按钮或直接拖动调节;处方保留选项默认为开启,即当中频输出通道完成一次中频治疗后,该通道保留该处方信息,便于下次继续在该通道执行同一处方;如果将处方保留选项设置为关闭,中频输出通道完成一次中频治疗后,即清楚处方信息,下次使用前需要重新选择中频处方。

低频设置项包括默认治疗时间、默认配置数量和处方锁定选项,其中默认治疗时间的可调范围为1-180分钟,格值为1,可通过点击“加”和“减”按钮或直接拖动调节;默认配置数量的可调范围为1-12个,格值为1,可通过点击“加”和“减”按钮或直接拖动调节;处方锁定选项默认为“手动”,成功配置常用低频处方后,需要手动点击完成锁定动作;如果设置为自动,成功配置常用低频处方后,将自动完成锁定动作。

具有恢复出厂设置功能,可将所有设置项和处方恢复至出厂状态。(注意:恢复出厂设置后,所有自定义处方将被删除,请谨慎使用该功能)

6. 简易故障排查与维护

6.1 简易故障排查

现象1:主机在正常接通电源后,电源指示灯不亮,且无法开机:

- (1) 请检查适配器是否正确连接电源和主机;
- (2) 请检查适配器和主机是否有明显的物理损伤或进水,如果有,请立即停止使用,并立即采用安全的方式移除电源;

现象2:主机正常开机后,电源指示灯亮,屏幕显示异常,或者触控功能失效:

- (1) 主机断电并重启;
- (2) 请检查屏幕区域是否有明显的物理损伤,如果有,请直接联系售后;

现象3:中频治疗功能异常:

- (1) 请确认中频通道电极线和理疗电极片是否有正确连接;
- (2) 请确认中频通道电极线是否有物理损伤,如果有,需要更换电极线;
- (3) 请确认中频治疗处方是否适用,或者处方参数是否在合理范围;

现象4:低频治疗功能异常:

- (1) 请确认主机与充电座是否正确连接;
- (2) 请确认无线接收器与充电座是否正确连接;

(3) 请确认无线接收器与理疗电极片是否正确连接;

(4) 请确认低频治疗各部分是否有明显的物理损伤或进水,如果有,请立即停止使用,并立即采用安全的方式移除电源;

(5) 请确认中频治疗处方是否适用,或者处方参数是否在合理范围;

如果按照上述建议故障排查后仍未解决,请联系司羿(长沙)智能科技有限公司,会尽快安排专业技术人员进行检修。

6.2 环境保护

本产品机器配件不能随意丢弃,否则会污染环境。

报废并停止使用的产品或配件,在丢弃前请咨询或联系专业的废弃物处理公司处理,或者联系经销商,或者按照当地有关法律法规的要求处理。

6.3 清洁、保养及维护

6.3.1 清洁、保养

- (1) 请在清洁干净的室内环境使用本仪器;
- (2) 远离高潮湿,高温环境;
- (3) 清洁时请关闭主机电源,并使电源线脱离与市电连接;
- (4) 请用软布轻轻擦拭主机表面,勿用有腐蚀的稀释剂、水、酒精、汽油直接清洁机器表面。

6.3.2 训练设备维护

(1) 日常维护由用户定期进行,主要维护内容包括主机外观表面清洁以及穿戴部件定期清洁和消毒,具体操作参考上述“清洁、保养”内容;

(2) 主机部分检修:

- 1) 电源相关部件(电源线、适配器、电源接口)松脱、失效、损坏;
- 2) 连接、操作和显示部件(主机上的按键、屏幕、各接口等)失灵、损坏
- 3) 操作软件各模块的运行状态及软件版本号确认;

以上步骤检修需要联系司羿(长沙)智能科技有限公司安排专业技术人员进行。

(3) 软件更新:根据设备稳定性和实际使用情况,司羿(长沙)智能科技有限公司会对系统软件进行更新;

(4) 建议故障排除请参考本说明书“6.1 简易故障排查”进行操作。